



定量吸入劑使用方法(Atrovent、Berotec、Duasma、Seretide50)


1. 移去護蓋。

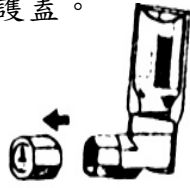


2. 將吸入輔助器較粗的一端，與吸入器口連接。

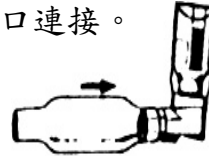


5. 將蓋子與吸入輔助器較邊連接。

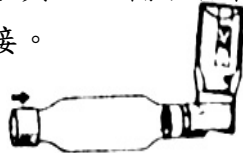

4. 上下搖動吸入器使藥品充份混合，並確認連接處是否緊密。

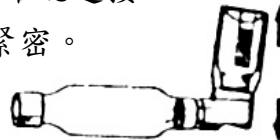

5. 以食指緊壓噴霧罐底部，按壓一次並確認有藥物噴出在輔助器內。

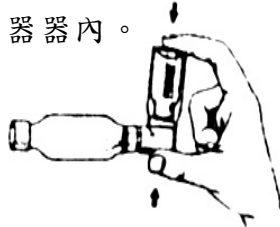

6. 先呼氣然後除去護蓋並立刻含住輔助器，以正常呼吸速度深深吸入藥品。



7. 閉氣至少 5~10 秒。


8. 若要使用第二個劑量，請等一分鐘後再重覆 3~7 步驟。

(Seretide 及 Duasma 使用後請用清水漱口)

9. 每週定期清洗吸入輔助器、噴嘴及含口器，避免阻塞。若有阻塞，用細針清潔噴射口及入料口即可。

◆ 如何檢查剩下的藥量？

將藥罐放入水槽內，然後觀察藥罐停留水內的位置來決定，見附圖如右：

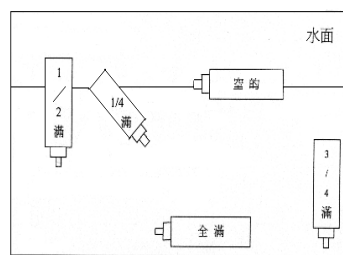

~~ 萬芳醫院藥劑部關心您 (02)29307930 分機 1138 ~~